

Ghibli Plus

Fast and compact Nebulizer
 Zerstäuber - schnell
 und kompakt



No-Spilling System. Prevents medication from spilling out even if the nebuliser is accidentally tipped over / Auslaufschutz.
 Verhindert, dass das Medikament ausläuft, selbst wenn der Zerstäuber versehentlich umfällt



Comfortable adult and paediatric Soft Touch masks
 Bequeme Soft-Touch-Masken für Erwachsene und Kinder



Convenient carrying handle
 Praktischer Transportgriff



The respiratory therapy
 Die Inhalationstherapie

— 50 —
 years of italian excellence

Ghibli Plus

Fast and compact Nebulizer
Zerstäuber - schnell und kompakt




Made in Italy




Technical Features / Technische daten

Use / Funktion	Continuous / Dauerfunktion
Power supply / Spannung	230V - 50Hz 130VA
Air filtering / Luftfilterung	For better quality, the compressed air is extracted external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (density 320 mg/cm ³) / Für eine bessere Qualität wird die Druckluft außerhalb des Gehäuses abgesaugt und mit einem hocheffizienten Filtersystem (Dichte 320 mg/cm ³) gefiltert
Compressor air output / Luftmenge Kompressor	9 l/min (approx) / ungefähr 9 l/min
Max pressure / Max. Spannung	1.8 ± 0.3 bar
Sound level (at 1 m) / Geräuschpegel (bis zu 1 m)	54 dB (A) (approx) / 54 dB (A) ungefähr
Dimensions (length x width x height) / Mase (L)x(P)x(H)	13.5 x 15.5 x 11 cm
Weight / Gewicht	1.1 Kg

Approvals / Sicherheitszulassung

In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive (for the 230 V - 50 Hz unit only) / CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt gem. Richtl. 93/42/EWG und folgende Änderungen	
Complies with: European standard EN 10993-1 "Biological Evaluation of Medical Devices" and European Directive 93/42/EEC "Medical Devices" Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006 In Konformität mit der Europäischen Norm EN 10993-1 "Biologische Beurteilung von Medizinprodukte" und der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG "Medizinprodukte". Phthalate frei. In Übereinstimmung mit Reg. (CE) n. 1907/2006	
In compliance with std. EN 60601-1 and EN 60601-1-11 (for the 230 V - 50 Hz unit only) / In Übereinstimmung mit std. EN 60601-1 und EN 60601-1-11 (nur für das 230 V - 50 Hz-Gerät)	

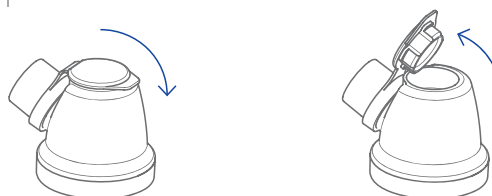

RF6 Basic² nebulizer technical features Vernebler RF6 Basic² technische daten

	Standard mode	High Speed mode
Delivery ml/min / Ausgabe ml/min	0.25 approx. (1)	0.32 approx. (1)
MMAD	3.8 µm (2)	4.0 µm (2)
Breathable fraction < 5 µm (FPF) / Inhalierbarer Anteil < 5 µm (FPF)	62% (2)	63% (2)
Maximum fill volume / Höchstmenge Arzneimittel	8 ml	

(1) Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure I29-P07.5. Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity / Erhobene Daten beim internen Verfahren Flaem I29-P07.5 – (2) In vitro characterization carried out at the Inamed Research GmbH & Co. KG on behalf of TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for aerosol therapy units. Further details are available upon request / In-vitro-Charakterisierung durch Inamed Research GmbH & Co. KG, in Zusammenarbeit mit der TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany und in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm für Aerosoltherapie-Geräte Norm EN 13544-1. Weitere Details auf Anfrage.

Accessories / Zubehör

RF6 Basic ² Nebulizer / Zerstäuber RF6 Basic ²
Mouthpiece / Mundstück
Soft Touch Adult mask / Maske SoftTouch für Erwachsene
Soft Touch Child mask / Manueller Zerstäubungsbefehl
1 m connection tube / 1 m Verbindungsschlauch

Ghibli Plus

Code	SA04P00
Model	GHIBLI PLUS
Master carton	8 pieces / 8 stücke



To know more



17793AO © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2020 - FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.